


최고의 양계 전용 백신 분무기

울바박

ULVAVAC™

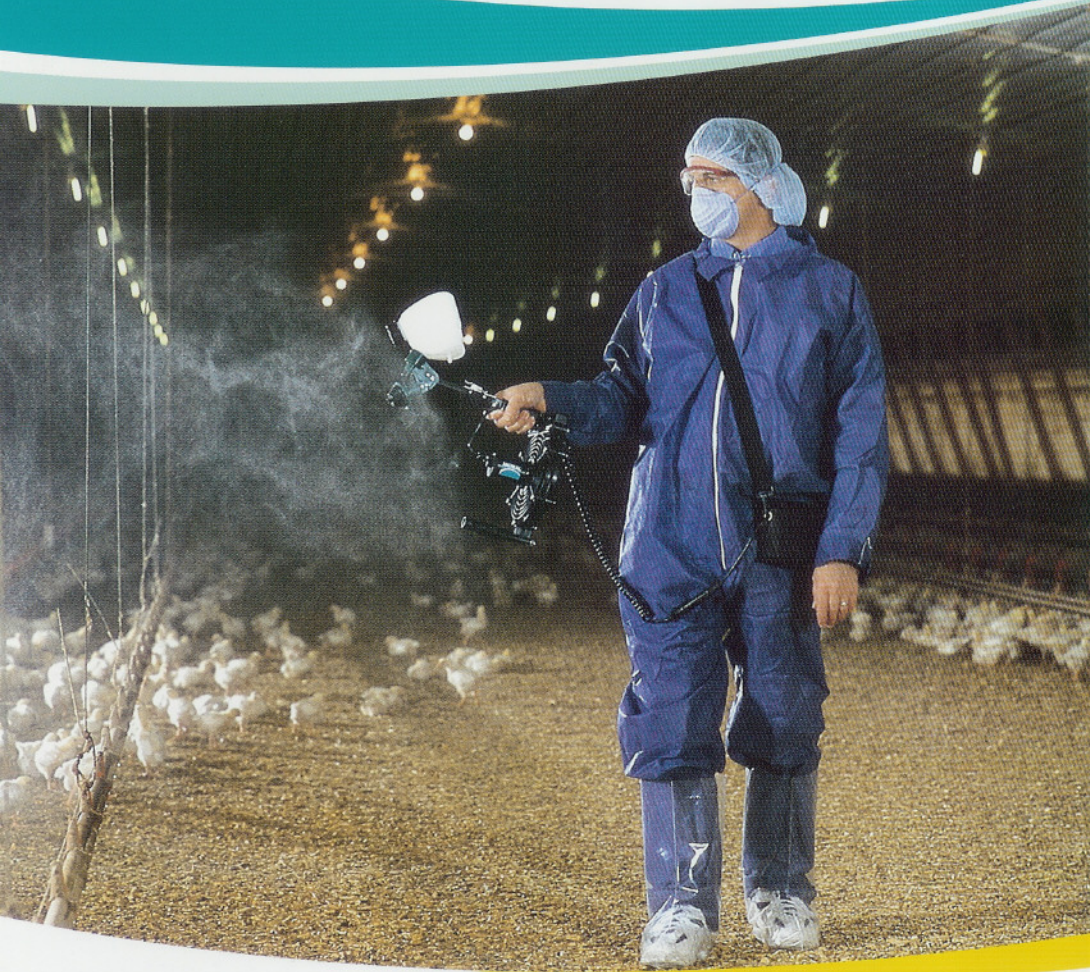

울바박의 특징점

- 가볍고 사용하기 쉽다
- 매우 조용하다
- 분무 입자 크기가 60-80 μ m 범위 내에 있다
- 분무 입자 크기가 전체적으로 매우 균일하다
- 사용 후 청소 및 세척하기가 간단하고 쉽다
- 전문가에 의한 지속적인 기술 서비스가 제공된다



백신 분무 방법에 의한 비교


◆ 울바박의 톱니 모양 디스크 (Spinning disc)

- 소량의 백신 희석액(증류수)만이 필요
- 분사 범위가 가로 1m, 세로 3m로 광범위
- 분무기 청소 세척 등 위생 관리가 용이



◆ 가압에 의한 분무법 (Pressure spray)

- 다량의 백신 희석액이 필요, 대부분 공중으로 허비됨
- 노즐 부위가 백신 접종 계군의 50-70cm 이내에 항상 근접해 있어야 백신 효과가 나타남
- 백신 탱크 등의 청소 세척 등이 어렵다

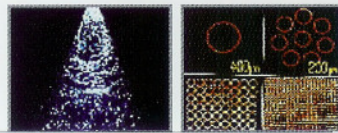

MERIAL 메리알코리아(주)
 서울 서초구 반포동 49-5번지 주호빌딩 3층
 TEL 02) 3478-2882 FAX 02) 3478-2888

DASRIM 한국 총판 및 기술서비스
다스림컨설팅
 대전광역시 유성구 봉명동 538-8 동아오피스텔 816호
 Tel : 042-822-6763-4 Fax : 042-822-6766